



使用方法

パイプハンガー

リモコンや
タオルなどを
掛けることが
出来ます。

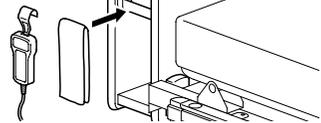

小物入れ

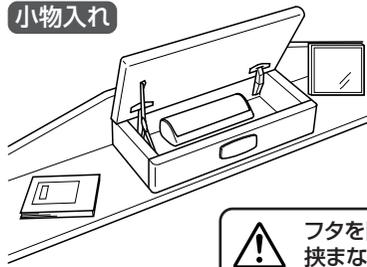

薬やメガネなどを
収納することが
できます。

注意 フタを閉めるときに指を
挟まないでください。
注意 ケガをする可能性があります。

日常のお手入れ


◎ 水で薄めた中性洗剤に布を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ってください。汚れを落としたり乾いた布でから拭きしてください。

注意 ベンジン・アルコール等の溶剤や漂白剤を使用
しないでください。
注意 表面のツヤ変化・変色・硬化・軟化が生じる可能性があります。

仕様


◆ RBタイプ (ニューベスティー棚)

材 質 : 天然木化粧板 + ウレタン塗装
外 寸 : W 927 × H 565 × D 176
重 量 : 22.5 kg
内 容 物 : 本体……………1

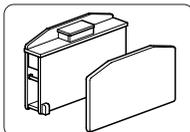

◆ YBタイプ (ニューリバティー棚)

材 質 : 化粧板
外 寸 : W 977 × H 490 × D 175
重 量 : 12 kg
内 容 物 : 本体……………1

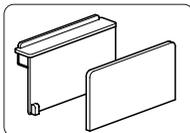

万が一不具合等ございましたら、販売店またはお近くの営業所・サテライトまでお問い合わせください。



ランダルコーポレーション

本社

〒351-0034 埼玉県朝霞市西原1-7-1
代 表 TEL 048-475-3661 FAX 048-475-3709
営 業 部 TEL 048-475-3662 FAX 048-475-3712
U R L <http://www.lundal.info>


株式会社ランダルコーポレーション 営業所一覧

本 社 工 場	〒 354-0044	埼玉県入間郡三芳町北永井421	TEL.049-259-4433	FAX.049-259-4430
青森サテライト	〒 030-0921	青森県森市原別8-9-1	TEL.017-736-9535	FAX.017-736-9534
岩手営業所	〒 020-0846	岩手県盛岡市流通センター北1-2-20	TEL.019-614-3007	FAX.019-639-0631
仙台営業所	〒 984-0821	宮城県仙台市若林区中倉3-17-54	TEL.022-782-5286	FAX.022-782-5287
埼玉北サテライト	〒 347-0002	埼玉県加須市外野432	TEL.0480-69-2171	FAX.0480-69-2172
所沢営業所	〒 354-0044	埼玉県入間郡三芳町北永井421	TEL.049-274-3132	FAX.049-274-3134
八王子サテライト	〒 193-0824	東京都八王子市長房町22-26	TEL.0426-68-9168	FAX.0426-68-9167
東京営業所	〒 120-0005	東京都足立区綾瀬1-20-18	TEL.03-5629-5080	FAX.03-5629-5081
千葉サテライト	〒 262-0022	千葉県千葉市花見川区南花園2-9-21RTサンライ101号室	TEL.043-213-5775	FAX.043-273-5754
横浜サテライト	〒 220-0023	神奈川県横浜市西区平沼1-30-6	TEL.045-317-6052	FAX.045-317-6053
名古屋サテライト	〒 485-0059	愛知県小牧市小木東1-12	TEL.0568-43-0790	FAX.0568-43-0830
大阪営業所	〒 578-0981	大阪府東大阪市島之内2-14-27	TEL.072-960-3600	FAX.072-960-3700
神戸サテライト	〒 652-0804	兵庫県神戸市兵庫区塚本通4-1-2	TEL.078-579-6525	FAX.078-579-6526
岡山サテライト	〒 700-0975	岡山県岡山市今8-3-35	TEL.086-242-6055	FAX.086-242-6066



取扱説明書

棚付きベッドシリーズ

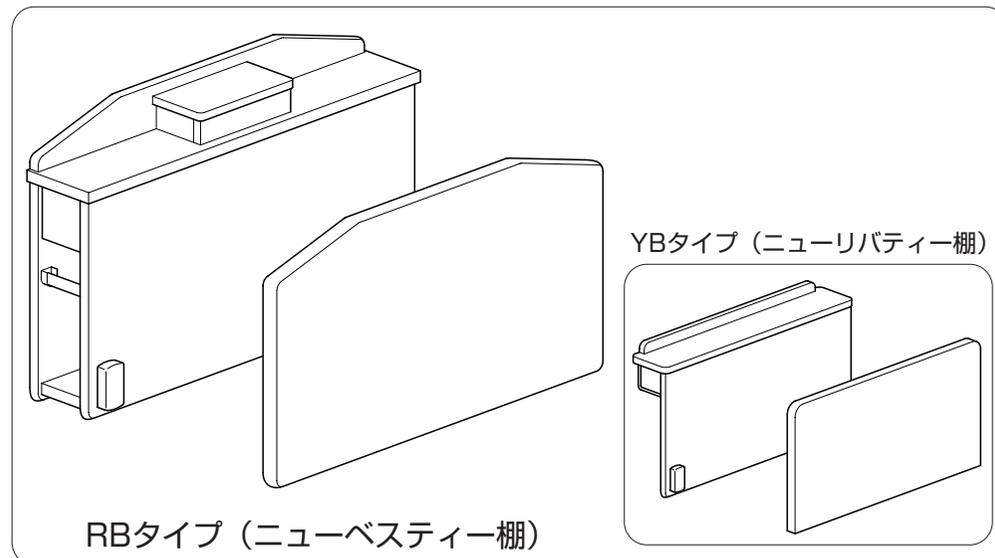

RBタイプ (ニューベスティー棚)

YBタイプ (ニューリバティー棚)

このたびは「棚付きベッドシリーズ」をお買い上げまたはレンタルいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。お読みになった後は大切に保管していただき、取り扱いのわからないときや不都合が生じたときにお役立てください。

安全にご使用いただくために

取り扱いを誤ると重大事故につながるおそれがありますので、ご使用前に本書を必ずよくお読みの上、正しくご使用ください。


警告 この表示を無視して取り扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して取り扱いを誤ると、人が傷害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

警告 棚の上に危険物(重い物や鋭利な物など)を置かないでください。
地震などの衝撃で落下し、ケガをする可能性があります。

注意 キャスターは必ず外側に向けてロックしてください。(オプション)
思わぬときに動いてケガをする可能性があります。


警告 ヘッドボードおよびフットボードに腰を掛けたり、棚に物をのせすぎないでください。
ベッドが破損したり、ベッドが浮いてケガをする可能性があります。棚の耐荷重は30kgです。

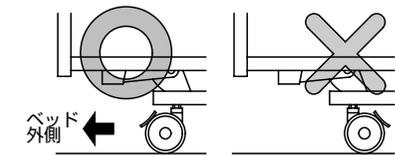


組み立てる前の準備

引出しの付け替え (ニューベスティー棚のみ)


- ◎ ベッドサイドを壁付けして設置する場合、左右どちらを壁側にするか確認してください。壁側に引出しがついている場合 (下図参照) は、以下の手順に従って反対側に引出しを付け替えてください。

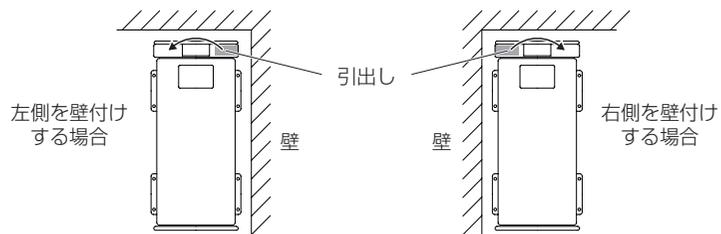

- ◎ 引出しを途中まで引き出し、落下防止用のダボを棚天板の裏側から取り外します。

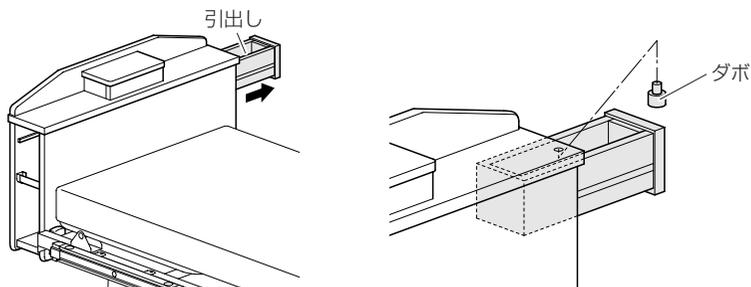


- ◎ 反対側に途中まで引出しを差し込み、先程の落下防止用ダボを取り付けます。

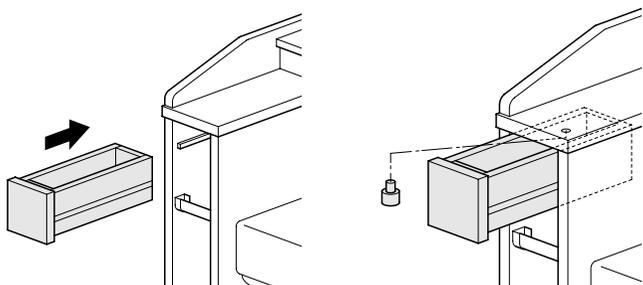


ベッドの設置確認

- ◎ 電動ハイローベッドをご使用の方は、ベッドが動くにつれて位置が変化しますので、右図を参照して設置を行ってください。

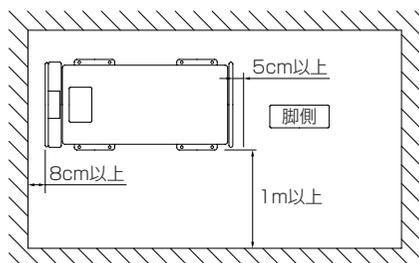


取り付け方法


- ◎ ヘッドボードの連結金具 (2カ所) のロック金具を解除します。

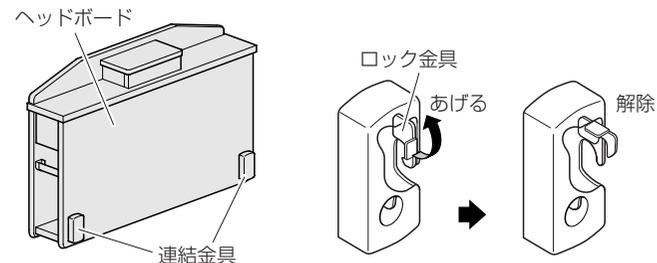


- ◎ 頭側幅だしフレームの連結ピンにヘッドボードの連結金具をはめ込んで、ロック金具をロックし、ヘッドボードを取り付けます。

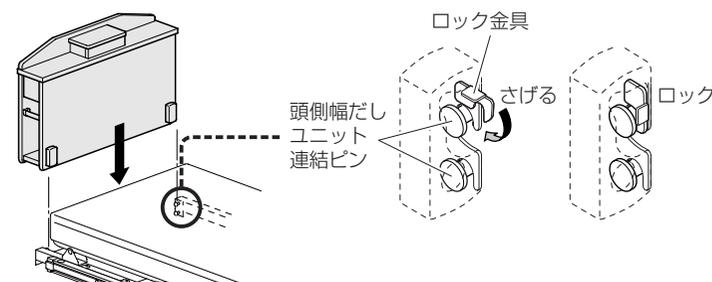

- ◎ 同様の手順でフットボードを取り付けてください。YBタイプ (ニューリパティー棚) も作業は同様です。 (取り付けのみ、引出しはありません)

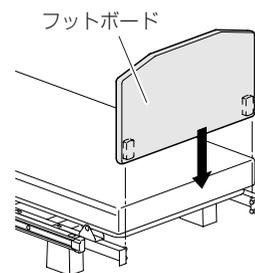

YBタイプ (ニューリパティー棚)

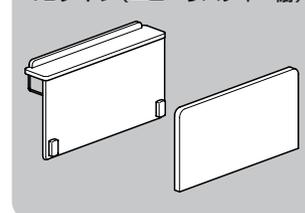

交換する場合

- 本製品を既存のヘッド・フットボードと交換する場合は、上記手順と逆の要領で既存のヘッド・フットボードを取り外してから、本製品を取り付けてください。

